





Ennen kuin aloitat
Täytä uusi säiliö
valmiiksi.

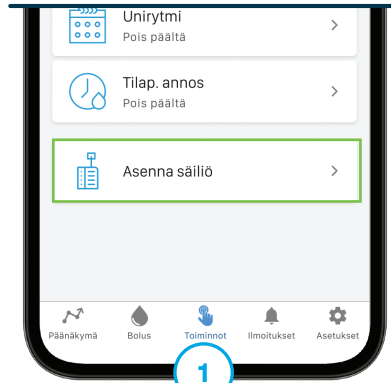

1

Paina päänäkömstä
Toiminnot ja valitse **Asenna
säiliö**.

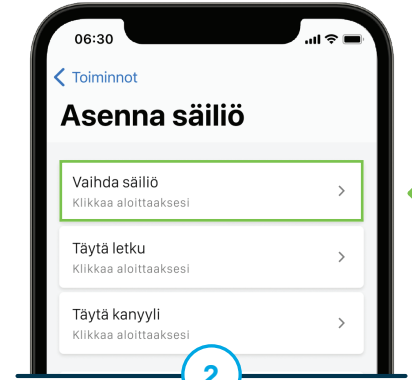

2

Paina **Vaihda säiliö** ja sen
jälkeen **Kyllä** pysäyttääksesi
insuliinin annostelun.



3

Irrota infuusiosetti kehosta
infuusiokohdasta. Paina **Jatka**.




4

Asenna uusi täytetty säiliö
ja paina **Jatka**. Paina **Jatka**
uudelleen.



5

Yhdistä infuusiosetin letku
säiliöön. Paina **Jatka**.

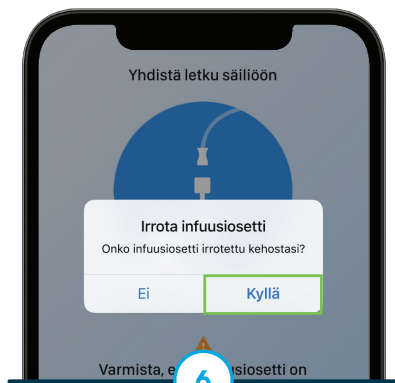


6

Paina **Kyllä** vahvistaaksesi,
että infuusiosetti on irrotettu
kehosta.



7

Pidä pumppu ja letku
pystyasennossa. Paina ja
pidä **Pumpun painiketta**
painettuna.

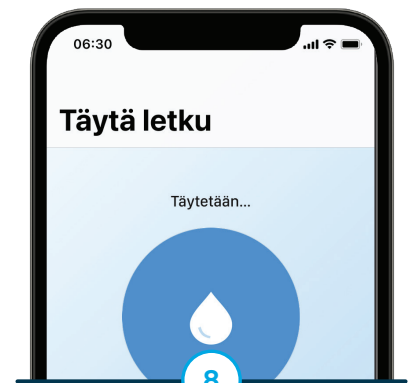


8


Kun näet kolme pisaraa
tulevan letkun päästä, vapauta
Pumpun painike.



Paina **Kyllä** ja yhdistä letku olemassa olevaan tai uuteen infuusiosettiin.

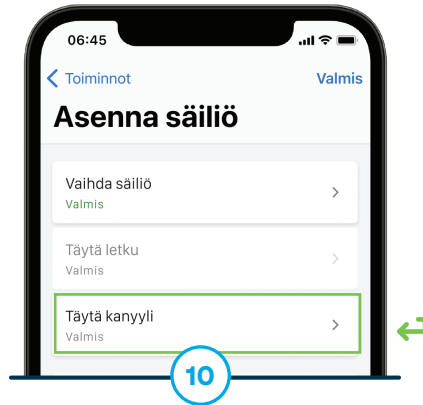


Paina **Valmis**. Jos tarpeen, paina **Täytä kanyyli**. Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen 13.

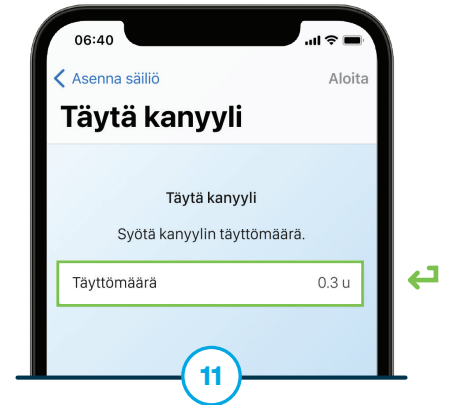


Jos tarpeen, paina **Täyttömäärä** muokataksesi sitä. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan vaiheeseen.



Paina **Aloita** täyttääksesi kanyylin. Paina **Valmis** jatkaaksesi.

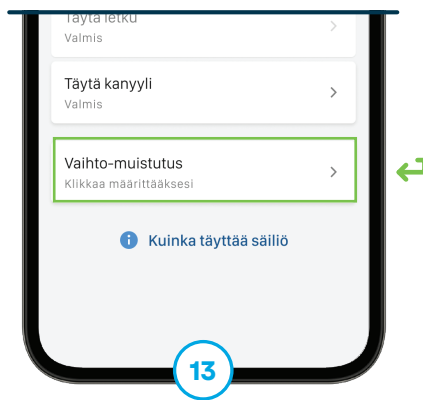

Jos haluat, paina **Vaihtomuistutus** ja aktivoi se. Tee muutokset ja/tai paina **Tallenna**. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan vaiheeseen.

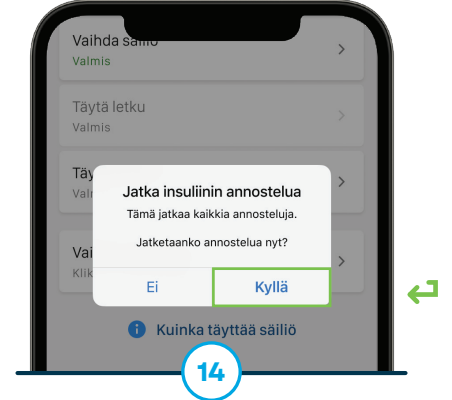

Paina **Valmis** jatkaaksesi ja sen jälkeen **Kyllä** jatkaaksesi insuliinin annostelua.



Pumppuvinkki: Pumppu ei saa koskaan olla yhdistettynä kehoon letkun täytön aikana.

Nämä ohjeet on tarkoitettu viitetäkaluksi pumpun käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat jo perehtyneet insuliinipumpun käyttöön ja insuliinihoitoon yleisesti. Kaikkia näyttöjä ei näytetä. Lisätietoja Tandem Mobi -järjestelmän toiminnasta löydät käyttöohjeesta.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care, Tandem-logot ja Tandem Mobi ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Tandem Diabetes Care, Inc.:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FI-2502-260421

Tandem Mobi -insuliinipumppu on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797. Valmistaja: Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, San Diego, CA 92121, USA. tandemdiabetes.com.