



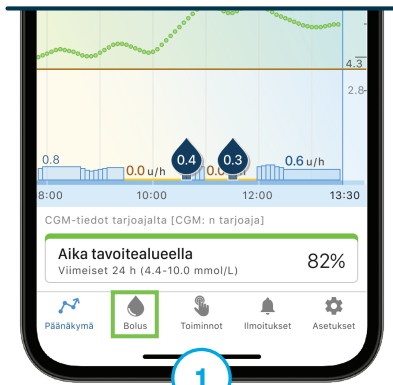


1

Paina navigointipalkista **Bolus**.

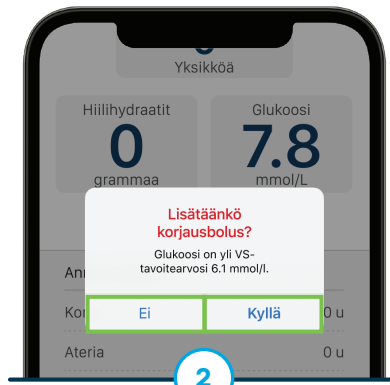


2

Jos glukoosiarvo (VS) on tavoitearvon yläpuolella, näyttöön tulee ehdotus korjausboluksen lisäämisestä. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

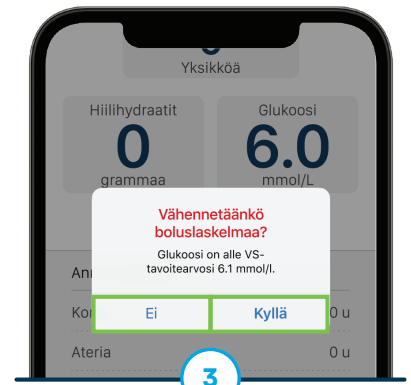


3

Jos arvo on tavoitearvon alapuolella mutta yli 3,9 mmol/l, näyttöön tulee ehdotus lasketun boluksen pienentämisestä. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

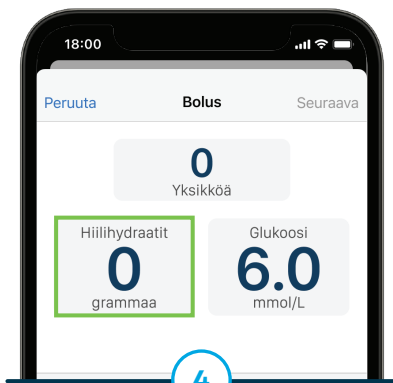

4


Paina **"0 grammaa"** -kohtaa syöttääksesi hiilihydraattien määrän.

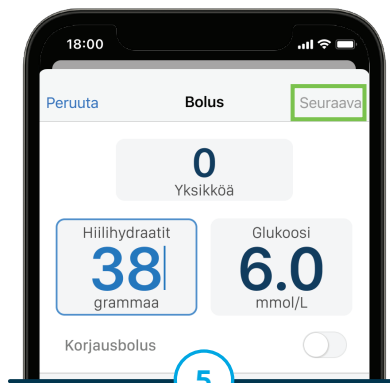

5

Paina **Seuraava** tallentaaksesi.

 Siirry seuraavalle sivulle **annostellaksesi pidennetyn boluksen** aterioille, joissa on paljon rasvaa ja/tai proteiinia (esim. pizza), hitaassa ruoansulatuksessa tai pitkäkestoisessa napostelussa (esim. juhlat).

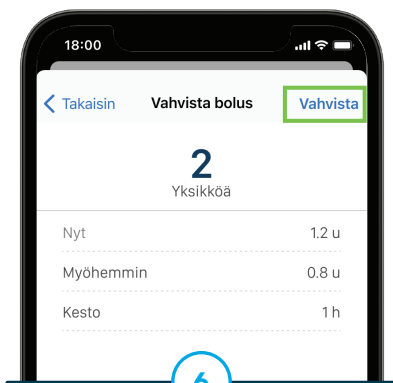

6


Paina **Vahvista**.



7


Paina pisarakuvaketta annostellaksesi boluksen.

Huom! Turvatoiminto, kuten Face ID tai koodi, vaaditaan ennen boluksen annostelun aloittamista.

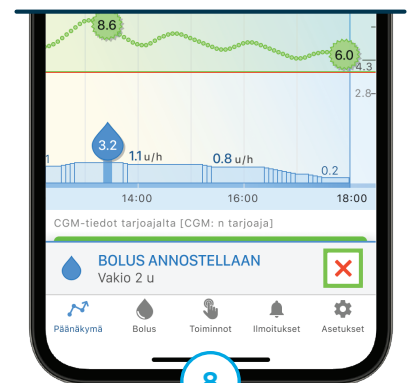


8

Keskeyttääksesi käynnissä olevan boluksen, paina  navigointipalkissa ja sen jälkeen **Kyllä** vahvistaaksesi.

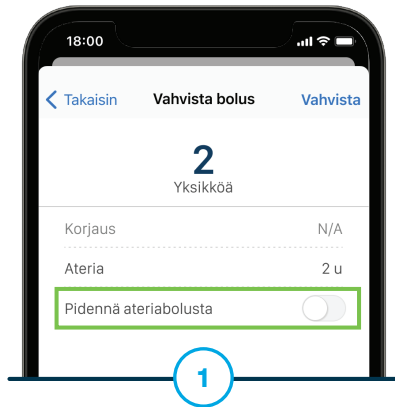


Laita vaihdin päälle (vihreälle).

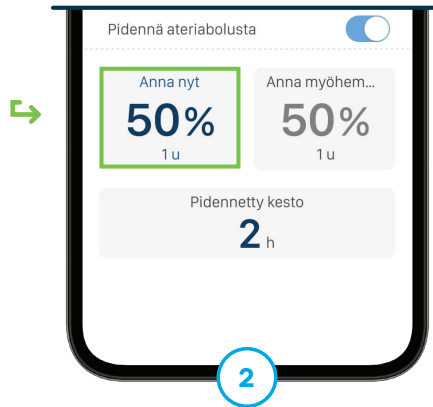


Käytä oletusasetuksia tai paina **Anna nyt** -kohdan prosenttimäärää päivittääksesi prosenttiosuuden.



Jos haluat muuttaa kesto, paina **2 h** -kohtaa ja muuta kesto.

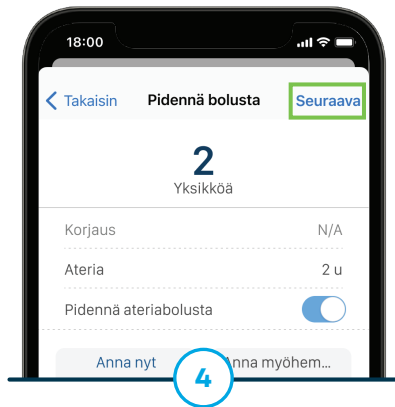

Paina **Seuraava** tallentaaksesi arvot.

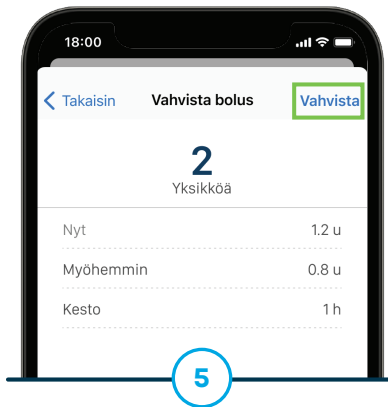

Paina **Vahvista**.



Paina pisarakuvaketta annostellaksesi boluksen.

Huom! Turvatoiminto, kuten Face ID tai koodi, vaaditaan ennen boluksen annostelun aloittamista.

Nämä ohjeet on tarkoitettu viitetäkaluksi pumpun käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat jo perehtyneet insuliinipumpun käyttöön ja insuliinihoitoon yleisesti. Kaikkia näyttöjä ei näytetä. Lisätietoja Tandem Mobi -järjestelmän toiminnasta löydät käyttöohjeesta.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care, Tandem-logot, Tandem Mobi ja Control-IQ+ ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Tandem Diabetes Care, Inc.:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FI-2503-260421

Tandem Mobi -insuliinipumppu on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797. Valmistaja: Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, San Diego, CA 92121, USA. tandemdiabetes.com.