



Jos Tandem Mobi -insuliinipumppu vaihdetaan tai käyttäjällä ilmenee toistuvia ongelmia sovelluksen kanssa, noudata näitä ohjeita **poistaaksesi pumpun ja sovelluksen välisen yhteyden** ennen uudelleenyhdistämistä.




Kiersten
diagnosoitu 1994



Jotta Tandem Mobi -insuliinipumppua voidaan ohjelmoida, se täytyy ensin yhdistää Tandem Mobi -mobiilisovellukseen. Varmista, että pumppu on päällä, lähellä eikä jo yhdistetty toiseen älypuheliimeen.*



Huomio: Nämä ohjeet on tarkoitettu viitemateriaaliksi pumpun käyttäjille, huoltajille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tuntevat jo insuliinipumpun käytön ja insuliinihoidon yleisesti. Kaikkia näytöjä ei näytetä. Tarkempia tietoja Tandem Mobi -järjestelmän toiminnasta löytyy käyttöohjeesta.

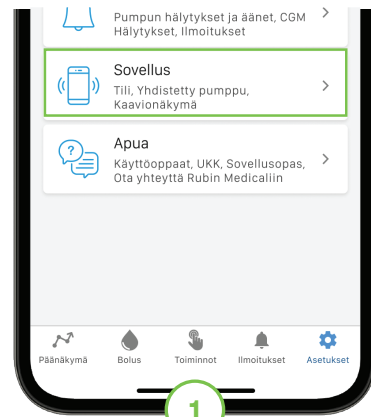

Valitse navigointipalkista **Asetukset** ja sen jälkeen **Sovellus**.

Huomio: Pumpun varoitukset, hälytykset, muistutukset ja virheilmoitukset näkyvät pumpun merkivalojen kautta myös silloin, kun pumppu ei ole yhdistetty älypuheliimeen.




Valitse **Yhdistetty pumppu**.



Valitse **Poista pariliitos**. Vahvistusviesti tulee näkyviin.


Huomio: Käytä tämän oppaan alussa olevia vaiheita parinmuodostusprosessin toistamiseen tai uuden laitteen parinmuodostukseen.

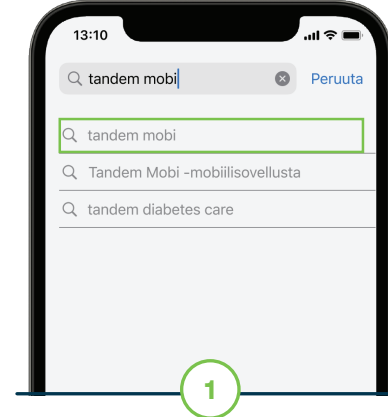

Siirry käyttäjän älypuhelimella App Storeen, hae "Tandem Mobi" ja asenna Tandem Mobi -mobiilisovellus.




Avaa Tandem Mobi -mobiilisovellus ja kirjaudu sisään olemassa olevilla tunnuksilla tai luo uusi tili Tandem Sourceen.

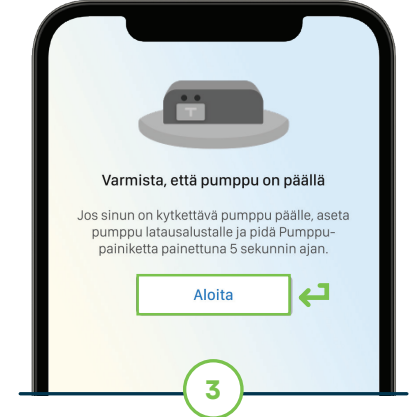


Aseta pumppu latausalustalle ja valitse mobiilisovelluksessa **Aloita**.

Huomio: Varmista, että pumppu on päällä painamalla Pumpun painiketta ja tarkistamalla, että pumpun merkivalot syttyvät.

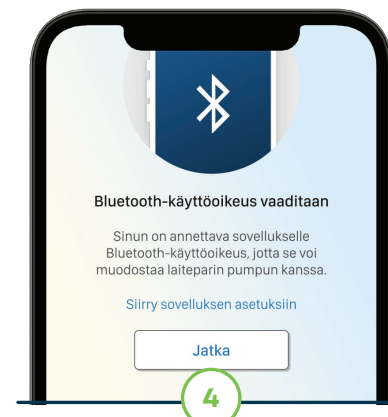

Jos **Bluetooth®** on pois päältä, mobiilisovellus antaa ohjeet sen kytkemiseksi päälle. Siirry seuraavaan vaiheeseen, jos Bluetooth on jo käytössä.

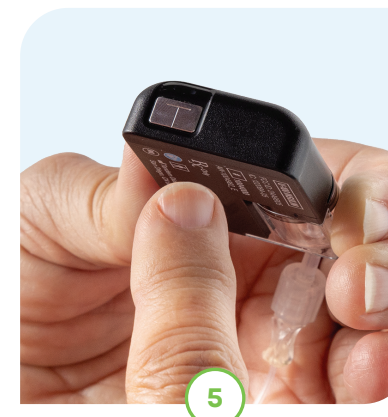

Nosta pumppu ja paina Pumpun painiketta kaksi kertaa.

Huomio: Jos tätä ei tehdä 120 sekunnin kuluessa, näkyviin tulee pumpun aikakatkausviesti.



Syötä kuusinumeroinen PIN-koodi, joka löytyy QR-koodin läheltä säiliön alta, ja valitse sitten **Valmis**.

Huomio: Irrota AINA infuusiosetti ennen säiliön poistamista.

* Tandem Mobi -insuliinipumppu voidaan yhdistää vain yhteen Tandem Mobi -mobiilisovellukseen kerrallaan. Pumpun yhdistäminen uuteen mobiilisovellukseen poistaa yhteyden aiemmin yhdistettyihin laitteisiin.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care, Tandem-logot ja Tandem Mobi ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Tandem Diabetes Care, Inc.:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Tandem Diabetes Care, Inc. käyttää niitä lisenssillä. Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä. Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille. Tandem Mobi -insuliinipumppu on CE-merkitty lääkeinlinen laite. CE 2797. Valmistaja: Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, San Diego, CA 92121, USA. www.tandemdiabetes.com. FI-2505-260424



Valitse **Muodosta yhteys pumppuun** ja sen jälkeen **Muodosta yhteys**. Kun viesti "Pumppu yhdistetty onnistuneesti" tulee näkyviin, valitse **Seuraava**.



Synkronoidaksesi pumpun ajan ja päivämäärän nykyisten iOS-asetusten kanssa, paina **Aseta nykyiseksi** ja sen jälkeen **Tallenna**.



Valitse **Synkronoi pumpun tiedot**.
Mobiilisovelluksen aloitusnäyttö tulee näkyviin.

Älypuhelimien asetukset

Jotta Tandem Mobi -mobiilisovellus toimii oikein, ota käyttöön tai poista käytöstä seuraavat asetukset älypuhelimessa:



Poista Zoomaus-tila käytöstä käyttäessäsi Tandem Mobi -mobiilisovellusta. Tämä löytyy puhelimen Asetuksista → Käyttöapu.



Ota käyttöön älypuhelimien suojausominaisuus (esim. näytön lukitus, pääsykoodi, kasvojentunnistus) ennen insuliiniannostelun säätämistä ja pumpun ohjelmointia.




Poista automaattiset päivitykset käytöstä jotta käyttäjä voi tarkistaa sovelluksen yhteensopivuuden uuden iOS-version kanssa ennen päivityksen tekemistä manuaalisesti.



Ota ilmoitukset käyttöön, poista virransäästötila käytöstä ja salli kaikki käyttöoikeuspyynnöt vastaanottaaksesi pumpun varoituksia, hälytyksiä ja muistutuksia.



Kun nämä suojausasetukset ja puhelinasetukset on tehty, **palaa takaisin** ja jatka vaiheesta 1.

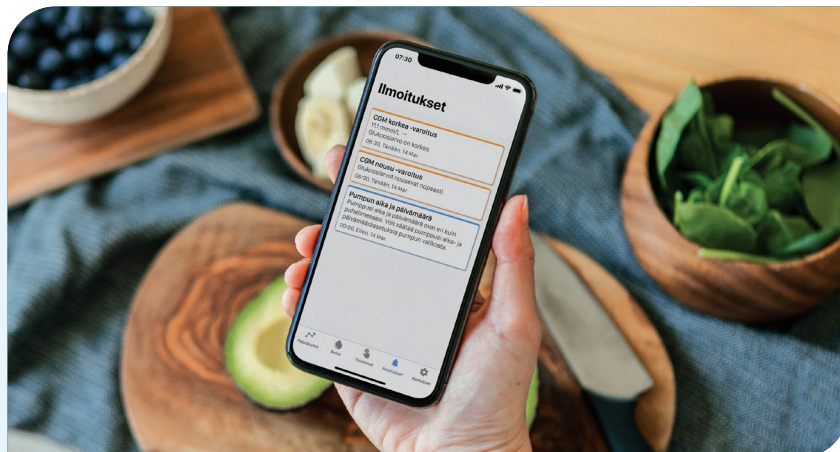

Vinkit ja vianmääritys

Tämä osio tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen, joita käyttäjä voi kohdata mobiilisovellusta käyttäessään.



Käyttäjätili

Jos käyttäjällä on jo Tandem Source -tili, kirjaudu sisään olemassa olevalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Uudet käyttäjät voivat luoda joko Vanhempi/Huoltaja-tilin tai Henkilökohtaisen tilin.



Pidä sovellus auki

Mobiilisovelluksen täytyy olla käynnissä taustalla, jotta se voi vastaanottaa ja lähettää tietoja Tandem Mobi -insuliinipumpun kanssa ja jotta käyttäjä voi vastaanottaa ilmoituksia.



Suojaa salasana

Älä koskaan jaa turvasalasanaa tai anna toiselle henkilölle oikeutta käyttää älypuhelimta biometrisillä tiedoillaan, jotta vältetään tahattomat muutokset insuliiniannosteluun.



Etsi pumppu

Jos pumppu katoaa, mobiilisovellusta voidaan käyttää signaalin lähettämiseen Yhdistetty pumppu -valikon kautta. Signaali saa insuliinipumpun piippaamaan ja värisemään kolme kertaa.



Vaurioitunut puhelin

Lopeta sovelluksen käyttö, jos älypuhelin tai suuri osa näytöstä on vaurioitunut. Käytä vaihtoehtoista insuliinin annostelusuunnitelmaa, kunnes laite voidaan vaihtaa.

Ilan
diagnosoitu 2013

