

Miten se toimii

Control-IQ+ -teknologia käyttää jatkuvan glukoosimittarin (CGM)* antamia sensoritietoja ennakoidakseen glukoositasoja 30 minuuttia eteenpäin ja säättää insuliinin annostelua automaattisesti, jos glukoositasojen odotetaan olevan ennalta asetetun hoitoarvon alapuolella tai yläpuolella.

Control-IQ+ -hoitoarvot

	◇	🏃	🌙
◇ Annostelee	AutoBolus†		
◇ B Lisää	Perusannostelu	10.0	10.0
◇ Ylläpitää	Ohjelmoitu perusannostelu	8.9	8.9
◇ B Vähentää	Perusannostelu	6.25	7.8
◇ 0 Keskeyttää	Perusannostelu	3.9	4.4

** CGM myydään erikseen. † Jos glukoosiarvojen ennakoitaan olevan yli 10,0 mmol/l, Control-IQ+ -teknologia laskee korjausboluksen käyttäen henkilökohtaisia profiiliasetuksia, tavoitearvoa 6,1 mmol/l ja annostelee 60 % tästä arvosta.


Kun valinnaiset Aktiivisuustilat Uni tai Liikunta ovat aktivoituina, käytetään tiukempaa väliä hoitoarvojen välillä suojatakseen entistä paremmin matalilta arvoilta liikunnan aikana ja korkeilta arvoilta unen aikana.




Control-IQ+ -teknologia
mmol/l

Tandem Mobi System


Control-IQ+ on suunniteltu auttamaan lisäämään aikaa tavoitealueella (3,9–10,0 mmol/l). Tämä opas kuvaa, kuinka Control-IQ+ -teknologia aktivoidaan ja miten algoritmi toimii.

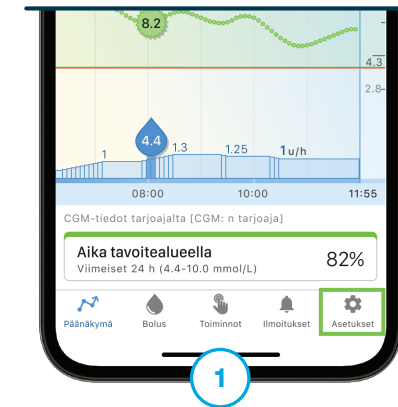


Valitse navigointipalkista **Asetukset**.

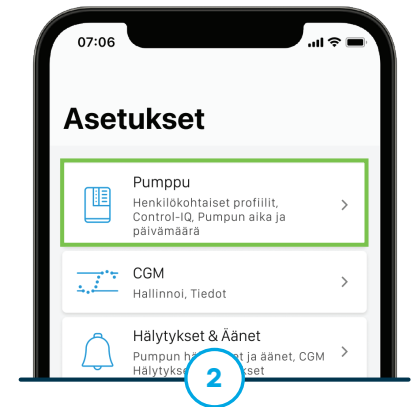

Klikkaa **Pumppu**. Käytä puhelimen turvaominaisuuksia vahvistamiseen.

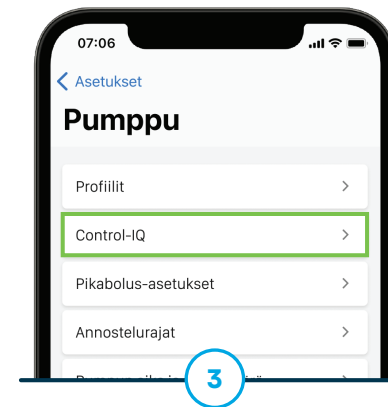


Klikkaa **Control-IQ**.

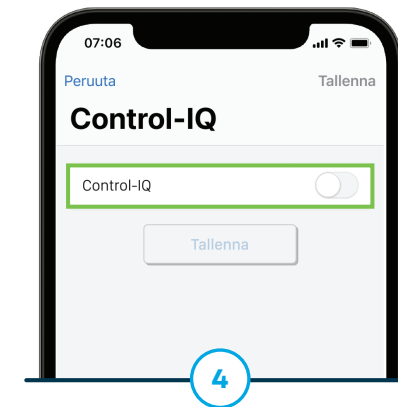


Aktivoi Control-IQ.




Klikkaa **Paino** -kohtaa, käytä näppäimistöä arvon syöttämiseen ja klikkaa **Valmis**.

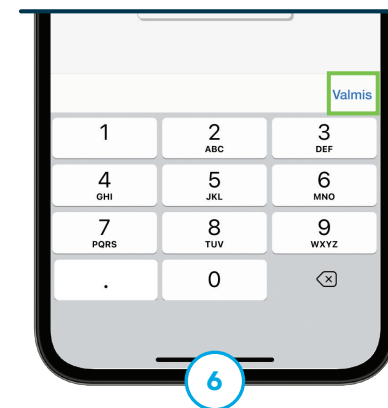

Klikkaa **Kokonaisinsuliini vrk**, käytä näppäimistöä arvon syöttämiseen ja klikkaa **Valmis**.

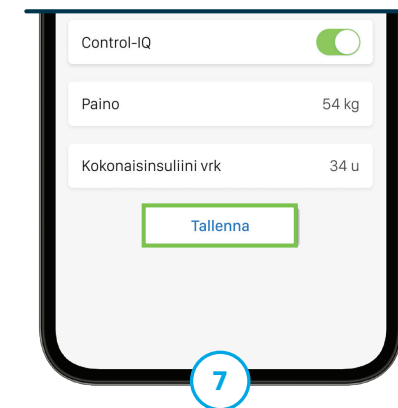

Klikkaa **Tallenna** vahvistaaksesi.

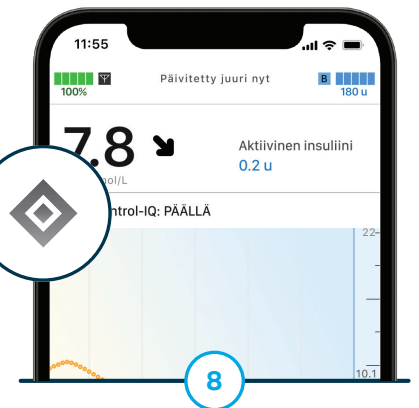

Tilakuvake näkyy aloitusnäytössä, kun Control-IQ+ on aktivoitu.

Nämä ohjeet on tarkoitettu viittetykaluksi pumpun käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat jo perehtyneet insuliinipumpun käyttöön ja insuliinihoitoon yleisesti. Kaikkia näyttöjä ei näytetä. Tarkempia tietoja Tandem Mobi -järjestelmän toiminnasta löytyy käyttöohjeesta.




www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care, Tandem-logot, Control-IQ, Control-IQ+ ja t:slim X2 ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Tandem Diabetes Care, Inc.:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut kolmansien osapuolten tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille. Tandem Mobi -insuliinipumppu on CE-merkitty lääkeinlinen laite. CE 2797. Valmistaja: Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, San Diego, CA 92121, USA. www.tandemdiabetes.com. FI-2506-260424

Aktiivisuustila Uni

Aktiivisuustila Uni
Tandem Mobi-järjestelmä voi automaattisesti siirtyä ennalta ohjelmoituun unirytmiin. On mahdollista ohjelmoida kaksi erilaista unirytmää.

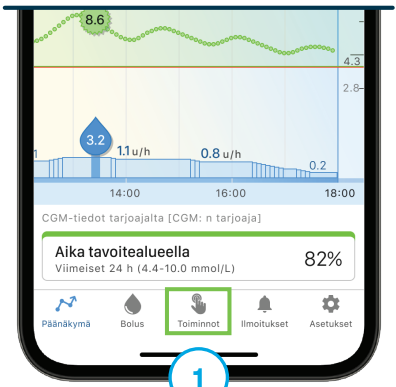

Valitse navigointipalkista **Toiminnot** ja sen jälkeen **Unirytmit**.




Klikkaa unirytmää muokataksesi sitä ja aktivoi sitten vaihdin.



Klikkaa **Aloitusaika** ja valitse haluamasi aika. Klikkaa **Valmis** jatkaaksesi.




Toista sama prosessi asettaaksesi **Loppumisaajan**.

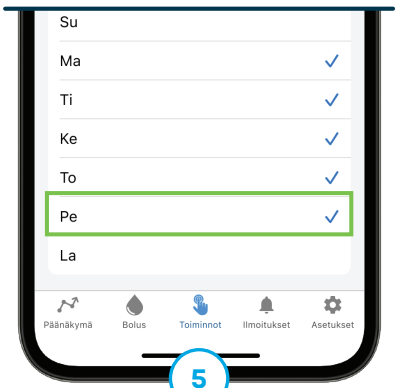


Klikkaa jokaista viikonpäivää, jolloin unirytmä on voimassa. Klikkaa **Tallenna** jatkaaksesi.

Manuaalinen aktivointi
Aktiivisuustila Uni voidaan myös asettaa päälle manuaalisesti, jos niin halutaan.

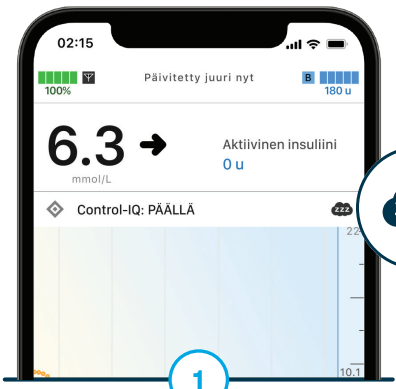


Kun Aktiivisuustila Uni on aktivoitu, kuvake näkyy **Päänäkyssä**.

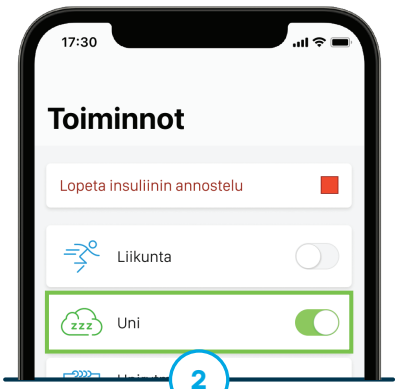


Valitse navigointipalkista **Toiminnot** ja aktivoi vaihdin kohdassa Uni kytkeäksesi pois päältä tai päälle Aktiivisuustila Uni.

Aktiivisuustila Liikunta


Aktiivisuustila Liikunta
voidaan ohjelmoida huomioimaan luonnollinen glukoositason lasku, joka voi tapahtua lisääntyneen aktiivisuuden yhteydessä.

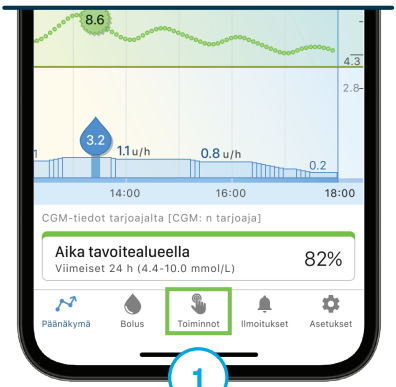

Valitse navigointipalkista **Toiminnot**.

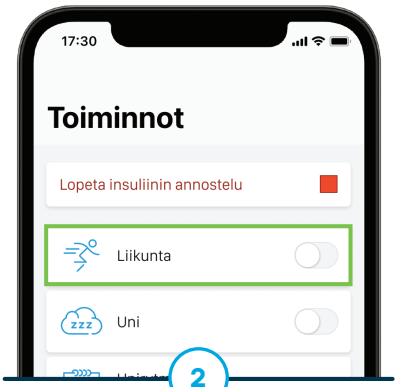

Aktivoi vaihdin kohdassa **Liikunta** käynnistääksesi aktiivisuustilan Liikunta.

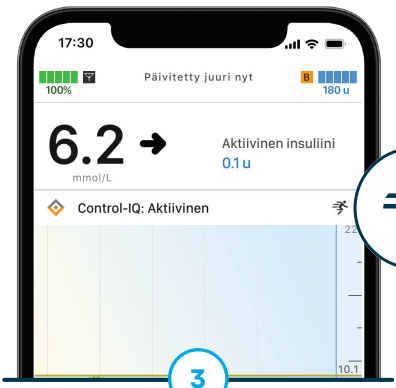

Kun toiminto on aktivoitu, kuvake näkyy **Päänäkyssä**.



Toiminnon pois päältä kytkemiseksi valitse **Toiminnot** navigointipalkissa ja sen jälkeen vaihdin uudelleen.

