




Näissä ohjeissa kerrotaan, mitä tehdä, jos jatkuvatoimisen glukosensorin (CGM)*, Tandem Mobi -insuliinipumpun tai Tandem Mobi -mobiilisovelluksen välinen yhteys katkeaa. Jos sensori menettää yhteyden pumppuun, mobiilisovelluksessa näkyy ilmoitus **Kantaman ulkopuolella**.

Yhteyden palauttamiseksi siirrä pumppu lähemmäs sensoria ja varmista, että pumppu ja sensori ovat käyttäjän keholla samalla puolella ja näköyhteydessä toisiinsa.



■ **Huomio:** Kunnes sensorin yhteys on palautettu, käyttäjän tulee käyttää verensokerimittaria ja testiliuskoja hoitopäätösten tekemiseen.

■ **Huomio:** Nämä ohjeet on tarkoitettu viitemateriaaliksi pumpun käyttäjille ja hoitohenkilökunnalle, jotka tuntevat jo insuliinipumpun ja insuliinihoidon yleiset käyttöperiaatteet. Kaikkia näyttökuvia ei ole esitetty. Lisätietoja Tandem Mobi -järjestelmän käytöstä löytyy käyttöohjeesta.

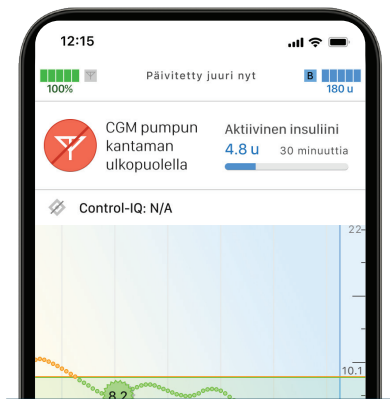

Jos sensori menettää yhteyden pumppuun, mobiilisovelluksessa näkyy ilmoitus **CGM pumpun kantaman ulkopuolella**.


Yhteyden palauttamiseksi siirrä pumppu lähemmäs sensoria ja varmista, että pumppu ja sensori ovat käyttäjän keholla samalla puolella ja näköyhteydessä toisiinsa.

■ **Huomio:** Kunnes sensorin yhteys on palautettu, käyttäjän tulee käyttää verensokerimittaria ja testiliuskoja hoitopäätösten tekemiseen.



Jos pumpun yhteys mobiilisovellukseen katkeaa, sovelluksessa näkyy ilmoituspalkki.

Yhteyden palauttamiseksi varmista, että **Bluetooth®** on edelleen käytössä ja että pumppu ja älypuhelin ovat enintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan.

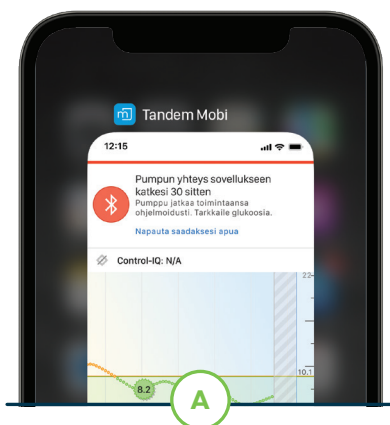

Jos yhteys ei palaudu viiden minuutin kuluessa, sulje mobiilisovellus tai pakota sen sulkeminen ja avaa sovellus uudelleen.



HUOM: Jos yhteys ei vielä kukaan palaudu, poista Bluetooth® käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön. Jos ongelma jatkuu, valitse ilmoituspalkista **Napauta saadaksesi apua**.

Mitä tapahtuu yhteyden katketessa?

Insuliinin annostelu

- ✓ Pumppu jatkaa perusinsuliinin annostelua henkilökohtaisen profiilin asetusten mukaisesti. Jos Tilapäinen perusannostelu (tilap. annos) oli ohjelmoitu, se jatkuu asetetun ajan mukaisesti.
- ✓ Bolus voidaan annostella pumpun pikaboluspainikkeella, jos toiminto on otettu käyttöön mobiilisovelluksessa. Mahdollinen aktiivinen bolus, joka oli käynnistetty ennen yhteyden katkeamista, jatkuu normaalisti.
- ✓ Pumppu vastaanottaa edelleen CGM-arvoja, ja jos Control-IQ+ -teknologia on käytössä, pumppu säätelee insuliinin annostelua automaattisesti.
- ✓ **Insuliinin annostelun keskeyttämiseksi irrota letku infuusiosetistä.**

Pumpun tilavalot



- ✓ Pumppu näyttää edelleen hälytykset, varoitukset ja pumpun tilatiedot tilavalojen avulla.
- ✓ Hälytykset keskeyttävät insuliinin annostelun. Insuliinin annostelun jatkamiseksi yhteys täytyy palauttaa.
- ✓ Varoituksia ja hälytyksiä ei voida kuitata pumpusta. Jos Torkkutoiminto on käytössä, käyttäjä voi mykistää ne määrääjäksi painamalla ja vapauttamalla pumpun painikkeen nopeasti kolme kertaa.

Mobiilisovelluksen näyttö

- ✓ Kaikki pumpun tiedot eivät välttämättä enää näy mobiilisovelluksessa (esimerkiksi akun tai insuliinin määrä, aktiivinen insuliini tai pumpun historia).
- ✓ Koska tietoja ei voida näyttää sovelluksessa yhteyden ollessa poikki, CGM-trendikäyrässä näkyy harmaa varjostettu alue.



Pumppuvinkki: Pumppu hyväksyy viestinnän vain tunnetuilta, pumpuun yhdistetyiltä laitteilta, kuten yhteensopivalta CGM-sensorilta tai henkilökohtaiselta älypuhelimeltasi. Jokainen laite täytyy yhdistää pumpun kanssa. Pumpun langaton tiedonsiirto on suojattu salauksella ja tunnistautumisella.

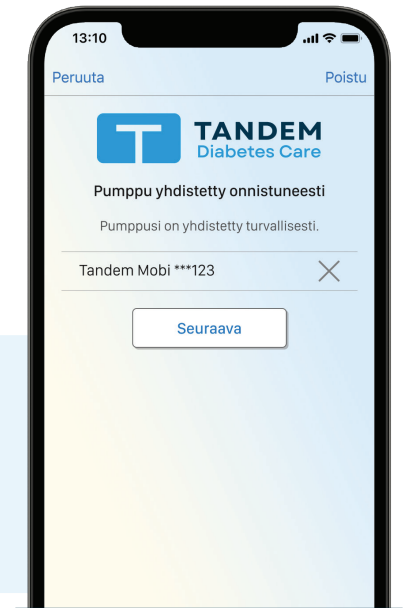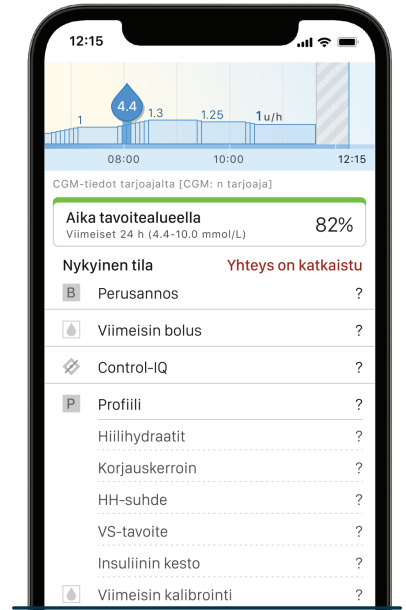

*CGM myydään erikseen.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care, Tandem-logot, Tandem Mobi, Control-IQ ja Control-IQ+ ovat Tandem Diabetes Care, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth®-nimi ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Tandem Diabetes Care, Inc. käyttää niitä lisenssillä. Tandem Mobi -insuliinipumppu on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797. Valmistaja: Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, San Diego, CA 92121, USA. www.tandemdiabetes.com. FI-2513-260506.