



Tandem Mobi-järjestelmä

Pikaopas



Sisältö

Pumpun painikkeen käyttö

Pumpun tilavalot

Värikoodien merkitys

Pumpun tila ja toiminnot

Varoitukset ja hälytykset

Pikaboluksen annostelu

Pumpun lataaminen

Pumpun akun varaustaso

Pumpun painikkeen käyttö

✓ Varoitusten ja hälytysten torkuttaminen:

Paina pumpun painiketta nopeasti kolme kertaa peräkkäin (torkutustoiminnon tulee olla käytössä).

✓ Pumpun tilan tarkistaminen:

Paina painiketta nopeasti kerran ja vapauta se (lyhyt viive ennen tilavalojen syttymistä on normaalia).

✓ Pikabolus:

Pidä pumpun painiketta painettuna, kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä tai tunnet värinän (jos värinä on käytössä). Lisätietoja kohdassa **Pikaboluksen annostelu**.

■ **Huom:** Pumpun painikkeella on myös muita toimintoja kuin tässä oppaassa mainitut. Lisätietoja käyttöohjeessa.

Pumpun tilavalot

Pumpun painikkeen yläpuolella on kaksi tilavaloa. Ne käyttävät eri värejä ja vilkkumiskuvioita pumpun tilan näyttämiseen.

Pumpun tilan tarkistaminen: Paina pumpun painiketta kerran. Tilavalot syttyvät ja näyttävät pumpun tilan.

Pumpun painike

Värikoodien merkitys

Tilavalot käyttävät eri värejä pumpun tilan ilmaisemiseen:



Vihreä:

Perusinsuliinin annostelu (normaali tai tilapäinen perusannos).



Sininen:

Bolusta annostellaan tai letkua täytetään säiliön vaihdon yhteydessä.



Valkoinen:

Pumppua ladataan tai insuliinin annostelu on pysäytetty manuaalisesti.



Keltainen:

Varoitus tai muistutus – tarkista Tandem Mobi -sovellus.



Punainen:

Hälytys tai toimintahäiriö – kaikki insuliinin annostelu on pysähtynyt.

▲ **Varoitus:** Hälytys tai toimintahäiriö vaatii välittömiä toimenpiteitä. Tarkista verensokerisi, jos älypuhelin ei ole käytettävissäsi.

Pumpun tila ja toiminnot

Seuraavat valokuviot näkyvät, kun tarkistat pumpun tilan tai käynnistät insuliinin annostelun:



Perusinsuliinin annostelu:

Valot syttyvät vuorotellen ja sykkivät vihreänä.



Tilapäinen perusannos:

Toinen valo palaa jatkuvasti vihreänä, toinen sykkii vihreänä.



Bolus:

Valot syttyvät vuorotellen ja sykkivät sinisinä.




Pidennetty bolus:

Toinen valo palaa jatkuvasti sinisenä, toinen sykkii sinisenä.

Varoitukset ja hälytykset


Pumppu viestii eri vilkkumiskuvioilla.

⚠ Varoitus: Tarkista verensokerisi, jos et pysty lukemaan varoituksia, hälytyksiä tai toimintahäiriöilmoituksia älypuhelimestasi.

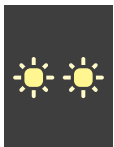

Muistutus:

Molemmat valot vilkkuvat keltaisina kerran.

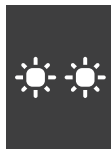

Kaikki insuliinin annostelu pysäytetty manuaalisesti:

Molemmat valot vilkkuvat valkoisina kolme kertaa.



Toimintahäiriö tai hälytys: ⚠

Molemmat valot vilkkuvat punaisina kolme kertaa.



Pumpun tai CGM:n varoitus: ⚠

Molemmat valot vilkkuvat keltaisina kaksi kertaa.

Pikaboluksen annostelu

Lue kaikki vaiheet ennen aloittamista:



1 Pidä pumpun painiketta painettuna.



2 Kuulet kaksi äänimerkkiä tai tunnet värinän.



Paina painiketta kerran jokaista annosteluvaihetta kohden, kunnes haluttu määrä on saavutettu (pumppu antaa äänimerkin tai värisee jokaisesta painalluksesta).




4 Odota vahvistusta (äänimerkki tai värinä) valitulle määrälle.



5 Pidä painiketta uudelleen painettuna, kunnes saat vahvistuksen ja bolus annostellaan.

Pumpun lataaminen

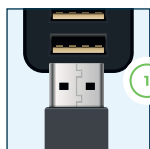

1 Varmista, että latausalusta on liitetty virtalähteeseen USB-kaapelilla.



2 Aseta pumppu latausalustalle.



3 Varmista, että latausalustan valo syttyy, kun pumppu on asetettu latausalustalle.

Pumpun akun varaustaso

Akun varaustason tarkistaminen ilman sovellusta **edellyttää**, että pumppu asetetaan latausalustalle.

Tilavalot näyttävät akun varaustason.



Latausalustan valo



Huomio: Kun pumppu asetetaan latausalustalle, LED-rengas palaa 30 sekunnin ajan ja himmenee sen jälkeen.

Akun varaustasot

Akun varaustason näkemiseksi pumpun **TÄYTY** olla latausalustalla.



Alle 50 %

Yksi valo sykkii valkoisena.



Yli 50 %

Toinen valo palaa jatkuvasti valkoisena, toinen sykkii valkoisena.



Ei varausta tai erittäin alhainen varaustaso

Yksikään valo ei pala tai yksi valo sykkii punaisena.



Täyteen ladattu

Molemmat valot himmenevät.



Lisätietoja löytyy käyttöohjeesta.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Mobi -insuliinipumppu on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797. Valmistaja: Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, San Diego, CA 92121, USA. tandemdiabetes.com FI-2544-260603