





Näissä ohjeissa kerrotaan, kuinka Tandem Mobi -järjestelmä päivitetään uusia toimintoja sisältävään ohjelmistoversioon.

Huom: Nämä ohjeet on tarkoitettu avuksi pumpun käyttäjille ja huoltajille, jotka tuntevat jo insuliinipumpun käytön ja insuliinihoidon yleisesti. Kaikkia näyttökuvia ei ole esitetty. Lisätietoja Tandem Mobi -järjestelmän käytöstä on sen käyttöohjeessa.

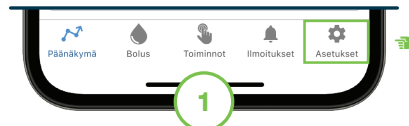


Klikkaa navigointipalkissa **Asetukset** ja sen jälkeen **Pumppu**.


Huomio: Järjestelmä käyttää laitetodennusta tietoturvan ja potilaan yksityisyyden varmistamiseksi.

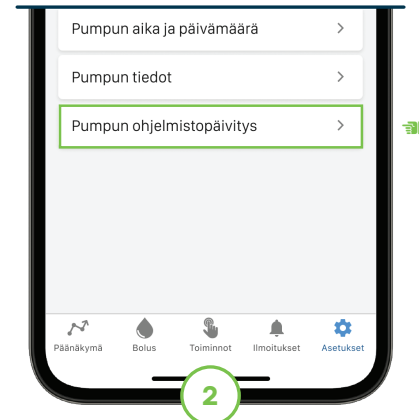

Klikkaa **Pumpun ohjelmistopäivitys**. Näyttöön tulee **Ohjelmistopäivitys saatavilla**, joka vahvistaa, että päivitys on saatavilla.

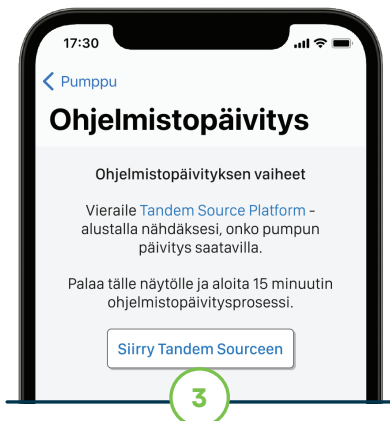


Jos tämän näytön ensimmäiset vaiheet on jo suoritettu, siirry vaiheeseen 4. Muussa tapauksessa klikkaa **Siirry Tandem Sourceen** suorittaaksesi ne.

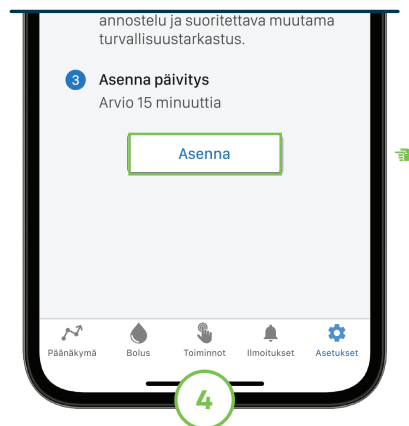

Klikkaa **Asenna**.

Mobiilisovellus aloittaa pumpun ohjelmistopäivityksen lataamisen.

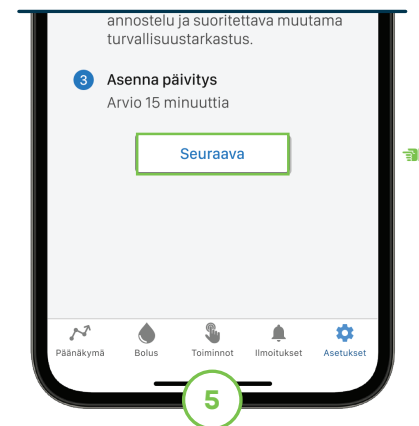


Kun päivityksen lataus on valmis, jatka klikkaamalla **Seuraava**.



Klikkaa kunkin turvallisuuteen liittyvän vaiheen vieressä olevaa ympyrää vahvistaaksesi, että olet lukenut ja ymmärtänyt ohjeet. Jatka klikkaamalla **Seuraava**.




Näyttöön tulee **Lopeta insuliini** -näyttö. Jos insuliinin annostelu on jo keskeytetty, siirry vaiheeseen 10. Muussa tapauksessa klikkaa navigointipalkissa **Toiminnot** ja sen jälkeen **Lopeta insuliinin annostelu**.

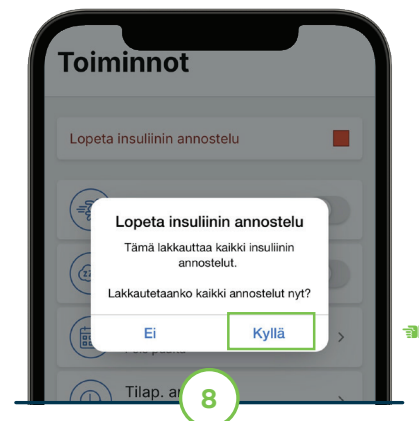

Vahvista insuliinin annostelun keskeyttäminen klikkaamalla **Kyllä**.

Varoitus: Irrota infuusiosetti kehosta.

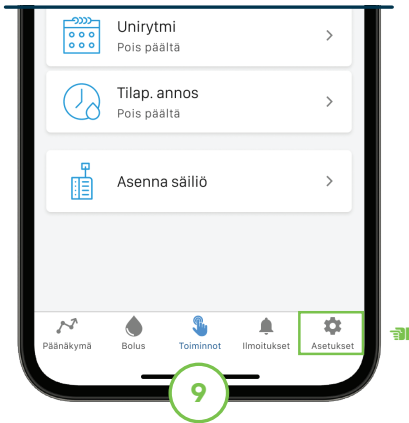

Klikkaa navigointipalkissa **Asetukset** ja etene vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti palataksesi ohjelmistopäivitykseen.



Jatka klikkaamalla **Seuraava**.
Klikkaa seuraavassa näytössä **Asenna** ja sen jälkeen **Asenna ja käynnistä uudelleen**.



Ohjelmistopäivitys alkaa.
Pidä pumpPU puhelimen vieressä tämän prosessin aikana. Prosessi voi kestää 10-15 minuuttia.



Kun ohjelmistopäivitys on valmis, klikkaa **Hylkää**.

Huom: Säiliö on vaihdettava ennen kuin insuliinin annostelua voidaan jatkaa.

Klikkaa näytössä **Täytä säiliö** tehdäksesi tämän nyt tai klikkaa **Siirry aloitusnäyttöön** tehdäksesi sen myöhemmin.



Pumppuvinkki: Jos ennen päivitysprosessin aloittamista oli aktiivinen sensorijakso, se on käynnistettävä uudelleen.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care, Tandem-logot, Tandem Mobi ja Tandem Source ovat Tandem Diabetes Care, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tandem Mobi -insuliinipumppu ja Tandem Mobi -mobiilisovellus ovat CE-merkittyjä lääkeinallisia laitteita. CE 2797. Valmistaja: Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, San Diego, CA 92121, USA. tandemdiabetes.com. FI-2619-260915