



Kolme tärkeää vaihetta tehtäväksi kotona ennen Dexcom G7:n ja Tandem t:slim X2:n käyttöönottamista

Nyt on aika käynnistää Dexcom G7 CGM yhdessä Tandem t:slim X2™
-insuliinipumppusi kanssa.

Jos haluat käyttää älypuhelimtasi* laitteena ja saadaksesi käyntiin
seurantatoiminnon läheisillesi, sinun on valmisteltava kolme tärkeää
vaihetta ennen sensorin käynnistämistä. Kaikki tämä sujuvan aloituksen
varmistamiseksi. Nämä kolme vaihetta on kuvattu tässä esitteessä.

Jos sinulla on kysyttävää, soita tai lähetä sähköpostia asiakastukeemme,
autamme mielellämme.

* Varmista, että laitteesi on yhteensopiva osoitteessa:
<https://www.dexcom.com/compatibility>



Vaihe 1

Lataa Dexcom G7 -sovellus

(sensorin käyttäjälle)

1. Lataa Dexcom G7 -sovellus:



Dexcom G7



App Store



Google Play

2. Luo Dexcom-tili Dexcom G7-sovelluksessa tai kirjaudu sisään nykyisellä Dexcom-tililläsi käyttäjänimelläsi ja salasannallasi, jos sinulla on jo sellainen.

HUOM! Tilin omistajan on oltava vähintään 18-vuotias. Jos olet alle 18-vuotias, luo alaikäisen tili.

3. Loput hoidamme klinikalla insuliinipumpun käynnistykseen yhteydessä.

HUOM! Muista kirjoittaa ylös ja tallentaa käyttäjätietosi! Erityisesti käyttäjänimi ja salasana ovat tärkeitä onnistuneeseen kirjautumiseen.

Muista:

Sensorijaksoja on aina käynnistettävä ensin pumpulla, sovellus on vain näyttölaite!

Sähköpostiosoite/Käyttäjänimi (kirjautumista varten)

Alaikäisen tilin käyttäjänimi

Salasana (kirjautumista varten)

Vaihe 2

Yhdistä Dexcom G7 -sovellus Glookoon

Dexcom G7 -sovelluksen avulla glukoosiarvot siirretään Glookoon pilven kautta. Sinun ei siis tarvitse käyttää kaapelia tai tietokonetta glukoosiarvojen siirtämiseen. Sinun tarvitsee vain liittää Dexcom-tilisi (G7-sovellus) Glooko-tiliisi. Voit myös antaa klinikallesi luvan nähdä glukoosiarvosi Glookossa syöttämällä klinikan ProConnect-koodin. Jos haluat nähdä Tandem t:slim X2™ -pumpun annoshistoriasi,

sinun on ladattava pumpun tiedot tietokoneeseesi micro-USB-kaapelin avulla (pumpun mukana tuleva), joko klinikalla tai omalla tietokoneellasi, Glookoon. Ohjeet pumpun historian lataamiseen omalle tietokoneellesi löytyvät tämän esitteen lopusta.

1. Lataa Glooko-sovellus puhelimeesi ja kirjaudu sisään Glooko-tunnuksillasi. Voit myös käyttää myglooko.com-sivustoa tietokoneella. Jos sinulla ei ole tiliä, luo sellainen.



Glooko



App Store



Google Play

2. Sovelluksessa: Siirry kohtaan "Synkronoi laite" ja valitse "Uusi laite". Valitse "Jatkuva glukoosimittari" ja sitten "Dexcom" ja "Lisää". Verkkosivustolla: Klikkaa oikeaa yläkulmaa. Mene asetuksiin ja vieritä alas kohtaan "Sovellukset ja laitteet" ja valitse "Dexcom".
3. Syötä käyttäjänimesi ja salasannasi Dexcom-tilillesi. Seuraa ohjeita.
4. Valitse "Lisää hoitotiimi" sovelluksessa ja kirjoita klinikkasi ProConnect-koodi antaaksesi klinikallesi luvan nähdä glukoositietosi Glookossa.
5. Arvot siirtyvät automaattisesti Glookoon vain 3–4 tunnin kuluttua.

Jos sinulla on kysyttävää Glookosta – älä epäröi ottaa yhteyttä Glookon tukeen puhelimitse +358 20 7619 670 tai sähköpostitse help@glooko.com. Löydät myös tietoa osoitteesta support.glooko.com.

HUOM! Muista kirjoittaa ylös ja tallentaa käyttäjätietosi!

Käyttäjänimi (sähköpostiosoite)

HUOM! Jos haluat liittää alaikäisen tilin Glookoon, sinun on annettava Dexcom-tilin sähköpostiosoite.

Salasana

Klinikan ProConnect-koodi

Muista:

Voit ladata pumpun historiatiedot vain tietokoneen kautta. Tähän tarvitaan Glooko Uploader -ohjelmisto.

Vaihe 3

Lataa Dexcom Follow -sovellus

(seurantatoiminnon käyttäjille)

Dexcom G7:n avulla voit jakaa glukoosiarvosi esimerkiksi vanhemillesi tai jollekin toiselle, joka voi tarjota ylimääräistä tukea. Voit lisätä enintään 10 seuraajaa.

1. Seuraaja lataa Dexcom Follow -sovelluksen:



Dexcom Follow



App Store



Google Play

2. Sinä käyttäjänä voit kutsua haluamasi henkilön seuraajaksi lähettämällä sähköpostiviestin Dexcom G7 -sovelluksestasi. Voit kutsua enintään 10 seuraajaa, ja kaikilla seuraajilla voi olla yksilöllisesti määritellyt hälytykset.
3. **HUOM!** Kun kutsut seuraajasi sähköpostitse, seuraajan on voitava avata sähköposti matkapuhelimessa/tabletissaan, eli laitteessa, jossa seuraajasovellus on ladattuna. Kutsu saattaa joskus päättyä seuraajan roskapostiin. Pyydä seuraajaasi tarkistamaan roskapostikansio, jos kutsua ei ole saapunut.

Näin siirrät historiatietoja Tandem t:slim X2™ -insuliinipumpun Glooko-sovellukseen omalla tietokoneellasi

Jotta voisit ladata pumpun tietoja Glookoon, tarvitset alkuperäisen micro-USB-kaapelin, jonka sait pumpun mukana, sekä Glooko Uploader -ohjelmiston asennettuna tietokoneellesi. Noudata seuraavia vaiheita ladataksesi Glooko Uploader -ohjelmiston ja aloittaaksesi sen käytön.

1. Siirry osoitteeseen myglooko.com ja kirjaudu sisään Glooko-tilillesi.
2. Klikkaa "Asetukset" aloituskirjaintesi vieressä oikeassa yläkulmassa. Vieritä alas kohtaan "Sovellukset ja laitteet".
3. Klikkaa "Hanki Glooko Uploader" ja valitse PC tai Mac.
4. Tallenna asennustiedosto tietokoneellesi.
5. Etsi asennustiedosto ja noudata asennusohjeita asentaaksesi Glooko Uploader -ohjelmiston.
6. Käynnistä tietokoneesi uudelleen ja käynnistä sitten Glooko Uploader.
7. Liitä pumpun micro-USB-kaapeli tietokoneeseesi.
8. Liitä pumppusi micro-USB-kaapeliin.
9. Aloita tietojen siirto pumpusta.
10. Kirjaudu sisään myglooko.com nähdäksesi tietosi.




Dexcom G7: näin se toimii



Sensori lähettää glukoosiarvot joka viides minuutti (6 metrin kantama)



Tandem t:slim X2™ -insuliinipumppusi

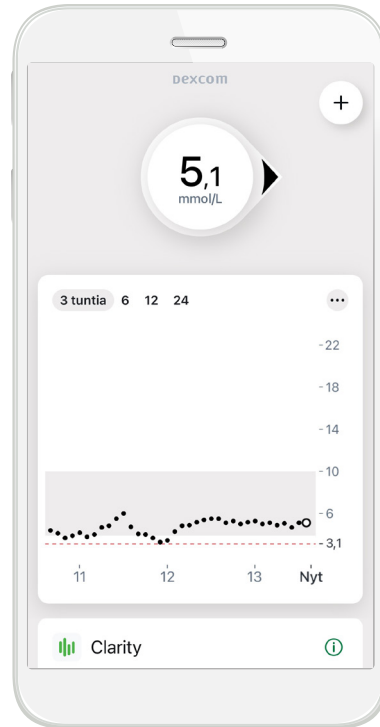

Älylaitteesi*
Dexcom G7-sovelluksella

Kuvat Dexcom G7 -sovelluksesta ja Follow-sovelluksesta ovat vain esimerkkejä


*Yhteensopivuusoppaan löydät osoitteesta <https://www.dexcom.com/compatibility>



Dexcom Share



Glooko-sovellus

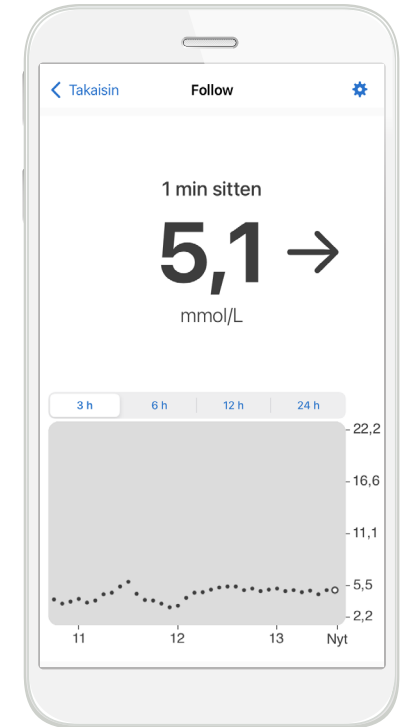

Seuraajan älylaite*
Dexcom Follow -sovelluksella

Autamme tekemään arjesta turvallisempaa

Maailman johtavien valmistajien laitteiden ja omistautuneen tiiminsä ansiosta Rubin Medical pystyy tekemään monien ihmisten arjesta entistä helpompaa ja turvallisempaa.

Tuotteemme määrätään aina terveydenhuollon kautta ja teemme tiivistä yhteistyötä hoitotiimien kanssa. Ohjevideoita, käyttöohjeita ja kysymyksiä ja vastauksia tuotteistamme sekä paljon muuta löydät sivustolta

www.rubinmedical.fi

Saadaksesi uusinta tietoa meiltä, seuraa meitä:

facebook.com/rubinmedicalsuumi
instagram.com/rubinmedicalsuumi

Asiakastuki arkisin klo 8.00–16.30: **03-422 1150**

Pumpun tekninen tuki muina aikoina: **03-422 1150**

www.rubinmedical.fi

