

Näin asetat AutoSoft 90



AutoSoft™ 90 on infuusiosetti, jossa on pehmeä kanyyli.

HUOM! Valitse infuusiokohta terveydenhuollon ammattilaisen suositusten mukaisesti. Älä käytä kohtaa aivan edellisen infuusiokohdan vierestä. Pese kädet. Puhdista infuusiokohta ja sen ympäristö desinfiointiaineella. Varmista, että alue on kuiva.



1. Avaa pakkaus vetämällä punaista teippiä irrottaaksesi muovitiivisteen. Poista steriili paperi. **ÄLÄ KÄYTÄ** tuotetta, jos tiiviste tai steriili paperi on rikki.



2. Paina lujasti kannen kummallakin puolella olevia kolmea kohokohtaa ja nosta kansi ylöspäin. VARO, ettet taivuta tai koske sisäänvientineulaan.




3. Irrota letkun pää **VAROVASTI** urasta. Kelaa letku auki asettimesta.

TÄRKEÄÄ: älä vedä letkua liian kovaa, jotta infuusiosetti ei irtoa asettimesta vahingossa.



4. Kiinnitä letku säiliön t:lock-liittimeen: Kierrä myötäpäivään, kunnes liitos on tiukka, ja kierrä sitten vielä neljänneskiertos kiinnityksen varmistamiseksi.

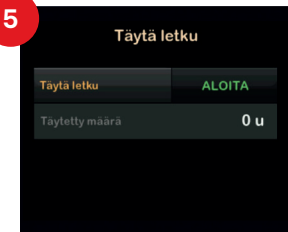

5. Täytä letku insuliinilla noudattaen insuliinipumpun käyttöohjeita.

ÄLÄ TÄYTÄ letkua, kun infuusiosetti on kiinnitetty kehoon.



6. Pidä letku pystysuorassa t:lock-liittimen kohdalla. Varmista, ettei liitoksessa tai letkussa ole ilmakuplia.



7. Pidä neula alaspäin, kun letku täyttyy. Täyttömäärät:
• 60 cm letku: noin 10–15 yksikköä
• 110 cm letku: noin 20–25 yksikköä
Lopeta täyttö, kun neulasta on tullut kolme tippaa insuliinia.



8. Poista suojapaperi varovasti. **ÄLÄ VEDÄ** liian voimakkaasti, jotta kanyyli ei irtoa asettimesta.



9. **ÄLÄ** kiinnitä letkua asettimen reunassa olevaan uraan ennen asettimen lataamista. Lataa asetin asettamalla sormet raidallisille, karkeille urille ja vedä ulospäin, kunnes kuulet naksahduksen.



10. Poista neulansuoja **VAROVASTI** kiertämällä. Varmista, että kanyyli on edelleen kiinni asettimessa.



11. Kiinnitä letku lähimpään pieneen uraan.



12. **VARMISTA**, että sisäänvientineula työntyy ulos pehmeästä kanyylista ennen asettamista.

13



Aseta asetin infuusiokohtaan. Paina **samanaikaisesti** molemmilla puolilla olevia pyöreitä syvennyksiä, jolloin infuusiosetti kiinnittyy ihoon. Asettimessä oleva kolmio osoittaa siihen suuntaan, johon letku asettuu.

14




Paina asetinta varovasti keskeltä, jotta teippi kiinnittyy kunnolla ihoon. Kun painat, voit päästää irti asettimen ulkoreunoista.

15



Poista asetin tarttumalla keskiosaan ja vedä varovasti suoraan ulospäin. Pidä kiinni vain valkoisesta keskiosasta. Kiinnitä teippi kunnolla ihoon hieromalla teippiä.

16

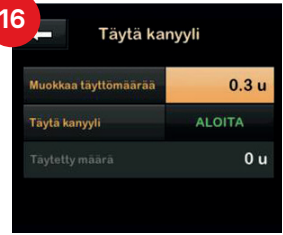

Täytä kanyyli seuraavilla määrillä:

U-100 INSULIN:

6 mm kanyyli: 0,3 yksikköä

9 mm kanyyli: 0,5 yksikköä

TARKISTA AINA

glukoosiarvosi 1–2 tunnin kuluttua varmistaaksesi, että infuusiosetti toimii oikein.

Irrottaminen ja uudelleenliittäminen

1



Aseta sormi kanyylin eteen. Paina kevyesti infuusiosetin sivuilta ja vedä infuusiosetin liitin suoraan ulos.

2



Pidä kiinni infuusiosetin liittimestä ja työnnä se takaisin kanyyliin. Sinun pitäisi kuulla napsahdus.



Skannaa koodi ja katso video AutoSoft™ 90 -infuusiosetin asettamisesta.

Tämä on lyhennetty versio AutoSoft™ 90 -käyttöohjeesta. Katso täydelliset tiedot Tandem t:slim X2™- ja AutoSoft™ 90 -käyttöohjeista.